


KWICKSCREEN®

MAKING SPACES

Technický list vzduchu



KwickScreen Air - Rozměry

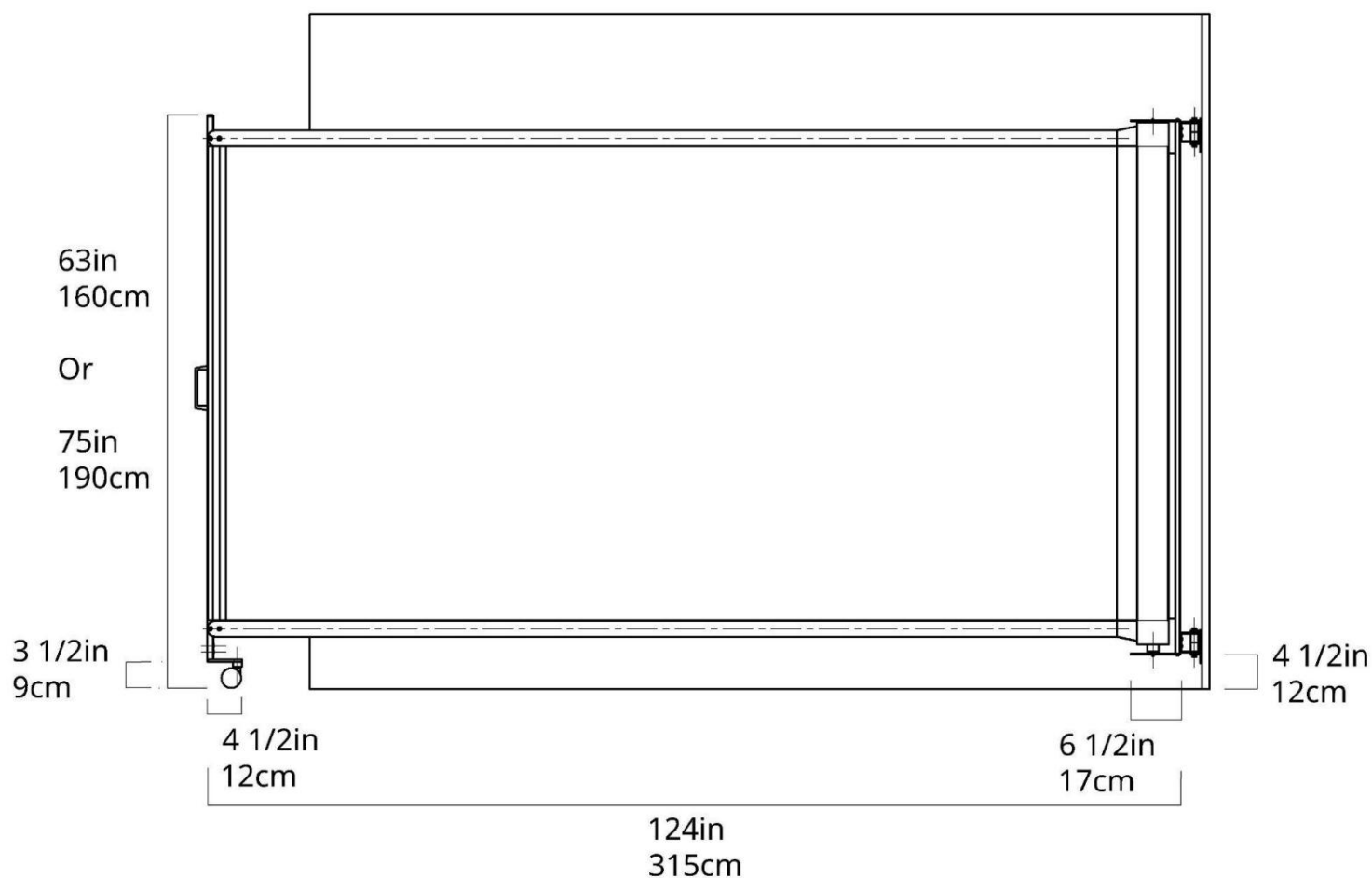

Délka Zavřeno	Délka Plně otevřený	Hloubka	Výška
17 cm	315 cm	31 cm	160/190 cm


Rozměry balení - 1 krabice na produkt

Kód zboží: 9402.90.0000

Popis: Privátní přepážka sestávající z ocelového těla, vnitřního panelu z polyesterové fólie, plastových koleček, ocelové základní desky a ocelových otočných kolíků.

Hlavní box - vzduch 160 cm vysoký (1)	Rozměry 165 x 26 x 26 cm 5,5" x 11" x 11"	16,5 kg 36,5 lb
Hlavní box - vzduch 190 cm vysoký (1)	Rozměry 199 x 26 x 26 cm 6,5" x 11" x 11"	18,5 kg 41 lb

KwickScreen Air - Podrobnosti o produktu

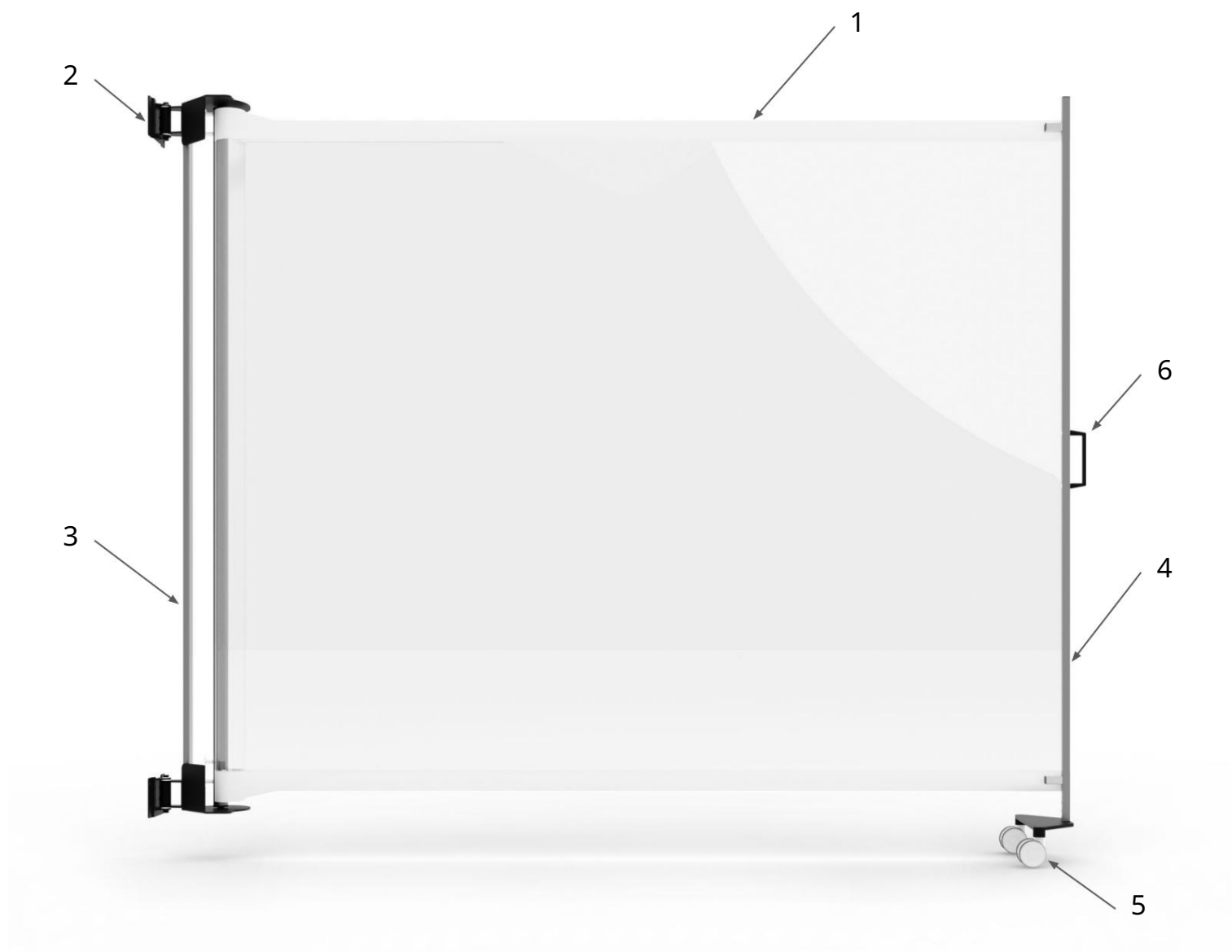


1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Nastavitelné držáky pro různé použití
3. Hliníkový hřbet
4. Ocelový rám s práškovým nástřikem
5. Kolečka lékařské kvality
6. Rukojeť s jedním dotykovým bodem

KwickScreen Air - Možnosti držáku


Vzduchová jednotka má k dispozici různé možnosti držáků, které vyhovují všem potřebám.

Otočný držák s rychlým uvolněním • Používá se k čištění kanálů • Otočný a rychlý uzávěr

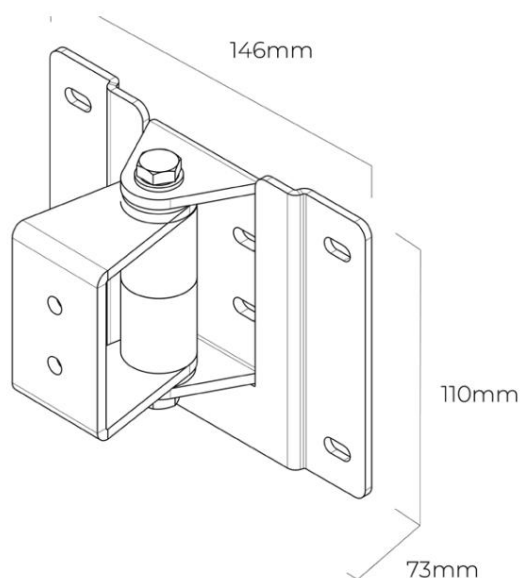


Otočný držák •

Menší půdorys • Upevnění přímo na stěnu (bez rychlého uvolnění)

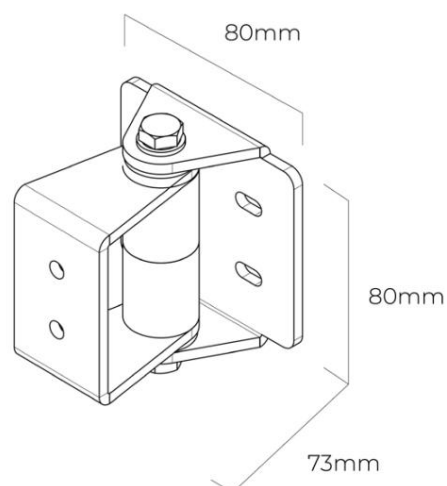


Zapuštěná montáž na stěnu •

Drží jednotku zarovnanou se stěnou

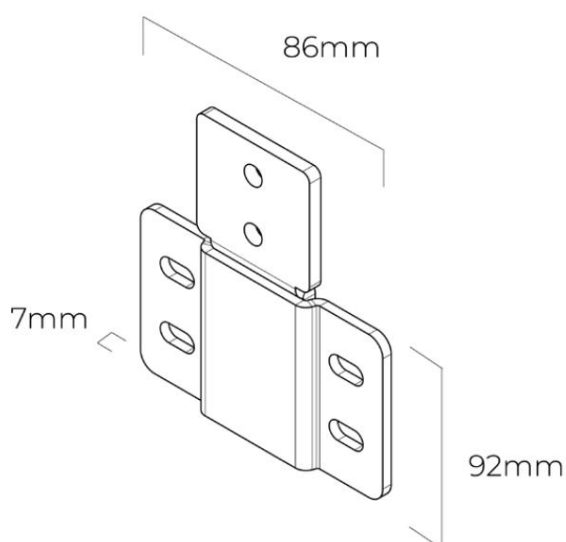

Statický odsazený držák • Drží

jednotku od stěny bez otáčení

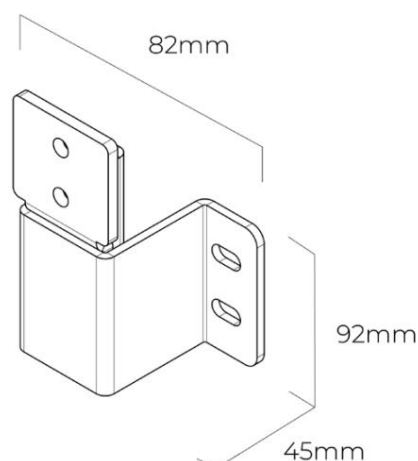

Čištění obrazovky KwickScreen

KwickScreens byly navrženy v souladu s pokyny pro kontrolu infekcí. Všechny naše obrazovky se rychle a snadno čistí pomocí standardních nemocničních čisticích prostředků.



Každodenní úklid

Obrazovku můžete čistit pomocí většiny čisticích prostředků pro zdravotnictví, včetně:

- Kvartérní • Roztoky bělidel
- Dezinfekční prostředek
- Virucidní dezinfekční prostředky
- Chlornan v 1 000 – 10 000 ppm nebo 60% alkoholový roztok • UV světlo • Peroxid vodíku

Odolné skvrny

Pokud běžné čištění neodstraní všechny skvrny, lze při pokojové teplotě použít následující čisticí prostředky

péče:

- Metylbutylalkohol
- Naptha VM&P
- Ethylalkohol
- Isopropylalkohol



Je třeba dávat pozor s potíštěnými panely při použití prostředků na bázi alkoholu.

Hluboké čištění

Pro hlubkové čištění zcela roztáhněte obrazovku a vyčistěte vnitřek těla. Při čištění KwickScreen nepoužívejte:



Jakékoli ostré nástroje nebo žiletky

oškrábat povrch



Tuky nebo oleje



Voskové leštidla



Výrobky s abrazivním povrchem, jako je ocelová vlna

Materiály a záruka

Rozdělení materiálu:

Kompozitní	uPVC (bílý materiál) Polyester (průhledný materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevňovací prostředky
7 %	11 %	52 %	16 %	13 %	1 %

Více než 95 % tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu)

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy

EU a Spojené království: EN13501-1: 2018 – Eurotřída B – s1 – d0

USA: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny KwickScreens se dodávají s 2letou zárukou výrobce na díly.

Seznamy náhradních dílů jsou k dispozici u společnosti KwickScreen nebo u vašeho místního prodejce.



Tato záruka vylučuje poškození způsobené nesprávným použitím, jako je ohnutí panelu obrazovky způsobem, k němuž není určeno. Další informace vám poskytne místní prodejce nebo společnost KwickScreen.