


Bezpečnostní doporučení


- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální nosnost 150 kg.
- Během přesunů klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslo zabrzděné.
- Položte obě nohy na opěrky nohou.
- Přední zapínání je při pohybu nahoru/dolů zavřené a paže by měly spočívat na loketní opěrce.
- Křeslo přemísťujte a posouvejte pouze v dolní poloze.

Ovládání

Nahoru

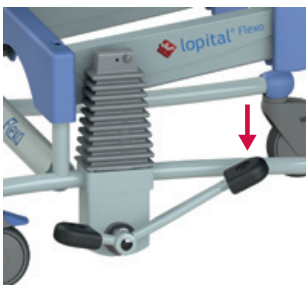

Dolů

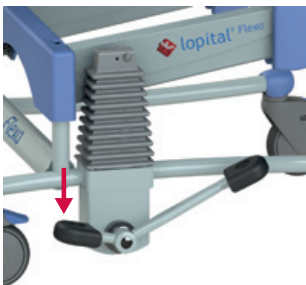

Důležité!
Tuto instruktážní kartu nelze považovat za náhradu za návod k použití.




Použití

1. Umístěte židli do správné polohy a vyklepte podnožky nahoru.
2. Zabrzděte židli!
3. Otevřete loketní opěrky a v případě potřeby je vyklepte nahoru.
4. Podepřete méně zdatnou osobu, když si sedá.
5. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavení provedete stejným postupem v opačném pořadí.

Blokování kol

1. Blokování kol.
2. Odemčení.

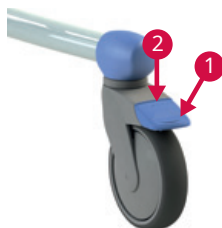


Opěrka nohou



Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit na židli, musí být obě podnožky sklopeny. Za tímto účelem sklopte podnožky (1) nebo vyklepte obě podpěry (2). Ujistěte se, že osoba s omezenou pohyblivostí má při pohybu obě nohy na podnožkách.

Loketní opěrka s předním zapínáním

1. Odemknutí.
2. Otáčení.
3. Skládání nahoru.

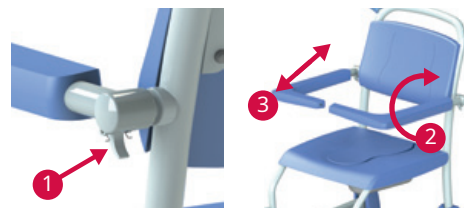

Funkce toalety

- Než si osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- V kombinaci s toaletou: Flexo lze přesouvat téměř nad každou toaletu. Posuňte křeslo nahoru nebo dolů pro dosažení správné polohy.
- S podložní mísou: Flexo lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuňte nerezovou/plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

Čištění a údržba

Flexo je nutné po každém použití čistit vodou a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte kolečka, zda na nich nejsou chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte.

Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o.
Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlifeshop.cz


Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.

Bezpečnostní výroky


- Lesen Sie die Benutzeranleitung (nalezeno na: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 150 kg.
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Frontverschluss beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armlehnen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur v einer tiefen Position.

Bedienung

Anheben

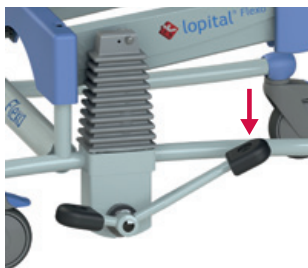

Absenken

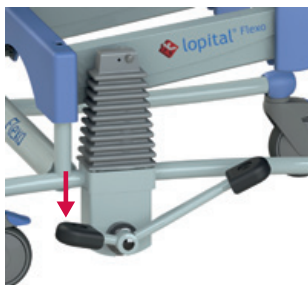

Důležité!

Diese Instruktionskarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.




Používejte

1. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
2. Vypněte stoličku!
3. Öffnen Sie die Armlehnen und klappen Sie diese bei Bedarf nach oben.
4. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
5. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Blokování válců

1. Blokování válců.
2. Vchody.

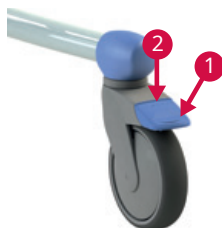


Nosní desky



Beide Fußplatten müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Dazu klappen Sie die Fußplatten (1) hoch oder drehen beide Stützen (2) zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne s předním závorou

1. Vchody.
2. Drehen.
3. Vysoké klapky.

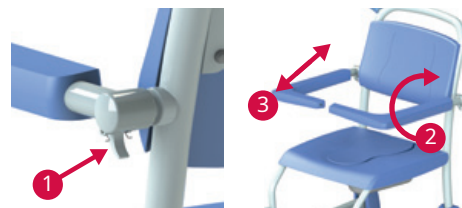

Funkce toalety

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl platznimmt.
- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Flexo Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- *S vedením:* Der Flexo Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoffbehälter unter den Stuhl.

Čištění a zateplení

Der Flexo Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel nebo andere agresivní Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf. Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Contact auf.
Tel.: +31 (0)13 - 5239300, Fax: +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Uživatelský návod

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de